

**طراحی و مشاوره  
تجهیز سکوبندی آزمایشگاهی  
هود های آزمایشگاهی**

## طراحی و مشاوره

شرکت آرنا تجهیز آرنیکا در زمینه طراحی، ساخت و اجرای سکوبندی و چهارگانه بیمارستانی با استفاده بهینه از نظرات شما مشتریان و همچنین کارشناسان خبره در خصوص تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و با استفاده از بهترین دستگاه‌های مدرن و بروز در این زمینه آماده خدمت رسانی به شما مشتریان محترم میباشد که با توجه به اهمیت و نوع کاربری فضای مورد نظر شما بهترین پیشنهادهای مربوط به امر سکوبندی و مشاوره رایگان به شما عزیزان میباشد که به شرح ذیل میباشد:

- 1\_ بازدید میدانی از محل پروژه.
- 2\_ ارائه راهکار و مشاوره و استفاده از نظر کاربر بخش مربوطه در راستای رضایت مشتری.
- 3\_ تهیه نقشه دکوراسیون و طراحی در کوتاه ترین زمان ممکن طبق تاسیسات موجود و کمترین تخریب و جابجایی به صورت 3d.
- 4\_ استفاده از قوانین اصولی طبق استانداردهای بین المللی 2010\_ iso7218 مربوط به آزمایشگاه.
- 5\_ مشخص نمودن رنگ بندی و نوع جنس، و متریا ل کاربردی طبق نظر مشتری.
- 6\_ ارائه گارانتی بی قید و شرط یکساله و 10 سال خدمات پس از فروش.

۱-۲	سکوبندی آزمایشگاه	۱
۳-۴	کابینت دیواری	۲
۵-۶	آنازور و میز ترازو	۳
۷-۱۰	تجهیزات جانبی	۴
۱۱-۱۲	کمدها	۵
۱۳-۲۴	انواع هودها	۶
۲۵-۲۶	بارنیشن بندی	۷
۲۷-۲۸	قفسه بندی داروخانه	۸
۲۹-۳۲	تجهیزات استیل	۹

## سکوبندی آزمایشگاه

در دو نوع سکوبندی دو طرفه و سکوبندی یک طرفه میباشد.

که در انواع مختلفی عرضه می شود که بنا به نوع درخواست مشتری و کاربری و نوع متریال خود عرضه می شود.

درکل ساختار سکوبندی دارای اجزا زیر می باشد:

- اشاس کشی (فریم یا اسکلت فلزی) که باریک الکترواستاتیک کوره ای میباشد در اندازه ها و کاربری های خاص مورد تغییر می باشد.



2. کابینت های زمینی و دیواری که از جنس pvc, mdf، فومیزه ، و یا formika پرس شده میباشد که با توجه به نوع کاربری آزمایشگاه متغیر است.

3. رویه (صفحه آزمایشگاهی) که در انواع مختلف و دارای کاربری های خاص میباشد شامل: سرامیک ضد اسید، سنگ طبیعی، گرانیت ، سنگ مهندسی ، کوارتز، کورین ، ترسا ، کربن، hpl، کامپکت لامینت میباشد.



## کابینت دیواری آزمایشگاه

که بیشتر در بالای میز کوبندی کنار قرار میگیرد و بر روی دیوار نصب میگردد که دارای درب قاب دار که قابلیت دیده شدن وسایل داخل کابینت میباشد که بنا به نوع استفاده کاربر و وسعت محیط کار ارتفاع و طول آن قابلیت تغییر دارند که در دو نوع سقف ساده و شیبدار (جهت شیب جلوگیری از گرد و خاک) ساخته می شود عمق 32 سانتیمتری و ارتفاع استاندارد 60 سانتیمتر میباشد.





## آنازور (شلف)

باتوجه به نوع کاربری که در آزمایشگاه دارد به دو نوع دیواری ( میز کناریک طرفه) و یا دو طبقه (میز وسط دو طرفه) تقسیم می شود.

1- با استفاده از متریال های PVC ، ام دی اف ، فلز استیل، فلز آهن ویا ورق با رنگ الکترواستاتیک گوره ای ساخته میشود.

2- محل دسترسی راحت به تاسیسات آب ، برق ، گاز وسایر تاسیسات.

3- امکان جایجایی و نصب راحت بدون کوچکترین تخریب.

4- قابلیت نصب شیرآلات ، پریز و شبکه بر روی تمامی نقاط زیر وروی پاکس.

5- دارای درجه بازشو مکنشی اضطراری  
6- طراحی و رنگ بندی باتوجه به نوع سکو انتخاب شده.





## میز توزین (میز ترازو)

میز توزین یا میز ترازو جهت قرار گرفتن ترازو های دیجیتال آزمایشگاهی خیلی حساس که مجهز به صفحه کاملا ضدلغزش و پایه های مستحکم، سنگین و قوی بدون لرزش جهت بروز خطا در محاسبات خیلی حساس.





**ATA**  
Arta Tajhiz Arnika  
آرنا تجهیز آرنیکا

## شیرآلات آزمایشگاهی

شیرآلات کاربری :

آب ، گاز ، هوای فشرده ، خلاوکیوم  
گاز طبیعی .

بدنه :

فلز برونج با پوشش رنگ  
الکرواستاتیک کوره مقام در برابر  
اسیدوباز

خروجی :

یک طرفه ، دو طرفه ، سه طرفه یا  
زوایای متغیر در روی میز زیر شلف  
و دیواری .






## رگ

رگ آزمایشگاهی که جهت قراردادن لوله ویسایش آزمایشگاهی که به عبارتی آبچکان وسایل آزمایشگاهی می باشد که در نزدیکی سینک آزمایشگاهی نصب میگردد.





## دوش چشم شوی اضطراری

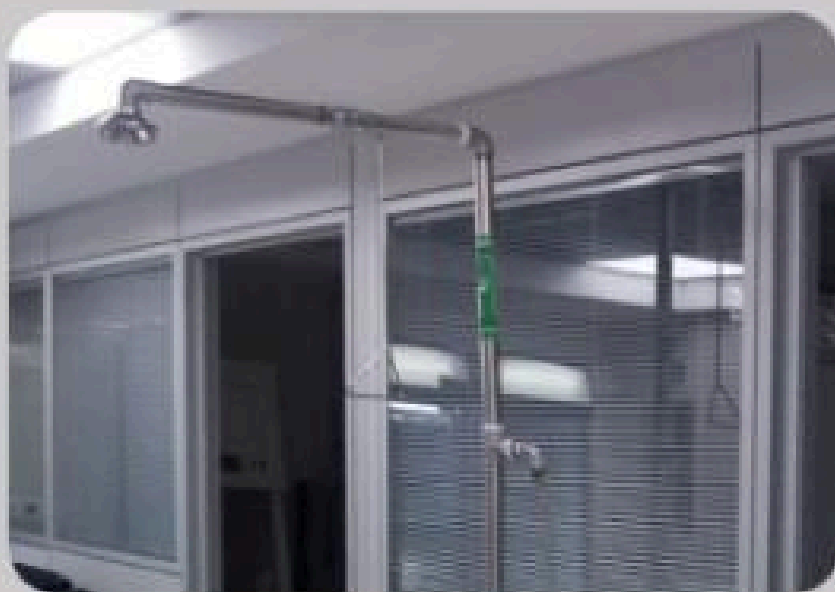


دوش های اضطراری که در دونوع ثابت و شاوری استفاده میگردد که در انواع مختلف استیل و یا کالوآلیزه با روکش رنگ الکترواستاتیک کوره ای و بنا به کاربری دیواری ، ایستاده و رومیزی استفاده میگردد.

## بریز برق آزمایشگاهی



چند مدل تک فاز و یا 3 فاز استفاده میگردد که دارای انواع مختلف دیواری ، رومیزی ، روشنی که بنا به محیط کار و نوع استفاده کاربرد تغییر پیدا می کند و دارای استاندارد p 44 و p 55 میباشد .

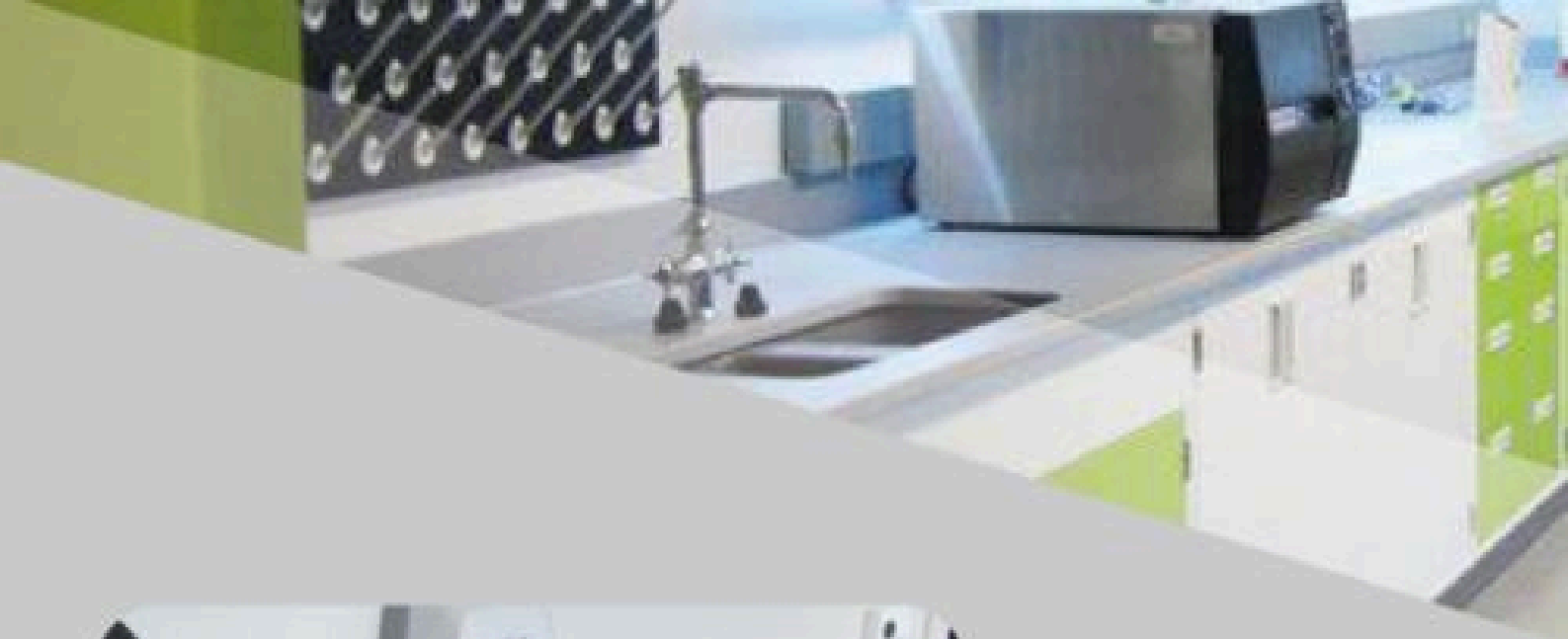


## سینک آزمایشگاهی

سینک ویا کاپ سینک های آزمایشگاهی که در انواع مختلف رزین اپوکسی ، سرامیک و استیل که بنا به کاربری مورد استفاده کاربران آزمایشگاه متفاوت و دارای خاصیت ضد اسیدی و بازی میباشد.



## کمد رختکن

رختکن اتاقی استراحت رختکن در دو نوع تک درب (تک سلول) و یا دو درب (دوسلول) که در ساخته شده در دو نوع mdf و pvc با توجه به شرایط آب وهوایی و یا نوع درخواست مشتری ساخته میشود که دارای یک قسمت جا کفشی ورگال یا آویز لباس و دارای قفل سوییچی تاشو مناسب ساخته میشود.

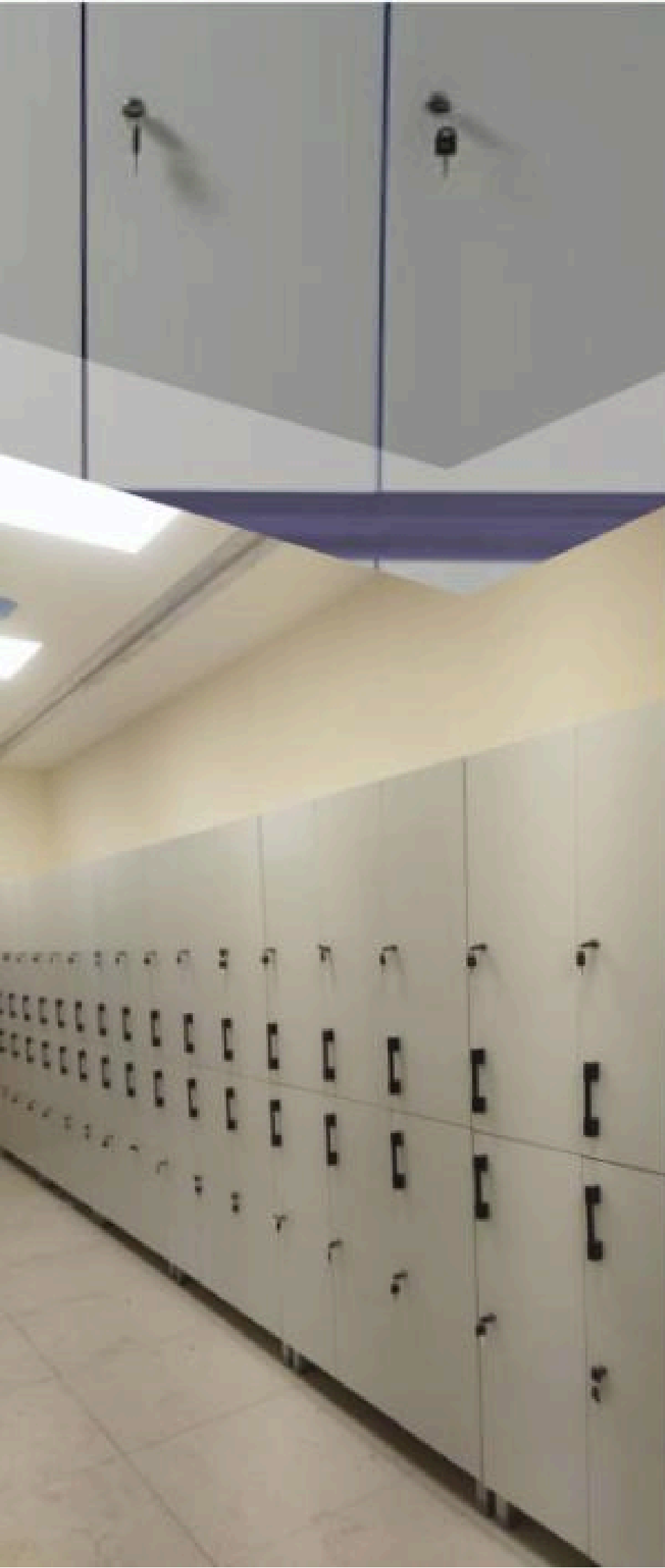

## کمد های زونکن و ایرانی

با توجه به استفاده از پرونده ها و اطلاعات بیمار ویا به درخواست مشتریان در انواع مختلف ام دی اف ، فلزی ویا pvc ساخته می شود و دارای پایه ها ، لولا ، قفل و دستگیره و متریال درجه یک ساخته میشود.



## هود فیوم شیمیایی

هود شیمیایی قابل استفاده در تمامی آزمایشگاههای شیمیایی، پژوهشی، تحقیقاتی و سایر مراکز مرتبط.

1. هود دارای شیر آب سرد و یک کاپ سینک و شیر گاز که هر دو به وسیله شیر نازل از بیرون دستگاه قطع و وصل میگردد که شیر (کیوم و هوا) نیز به دلخواه و کاربری مشتری اضافه میگردد.
2. بدنه بیرونی و داخلی دوجداره هم عمدتاً از جنس  $mdf/pvc/stell$  و با فرمیکابنا به کاربری محیط ساخته میشود. 3. صفحه کار هود نیز به دلیل استفاده از مواد اسیدی و بازی به انواع مختلف شامل سرامیک، سنگ گرانیت، کوارتز، کربن استیل، کربلن و ترسپانسیم میگردد که دیواره پشتی دوجداره و با قرنیز به صورت کاملاً آب بندی مورد استفاده قرار میگیرد.





4\_ دارای روشنایی بالای 400lm ای دی می باشد که یک فضای کم‌جهت تاسیسات و نگهداری مواد در زیر هود تعبیه شده است که به دو صورت ثابت و پرتابل میباشد. شیشه ضد انفجار سه لایه سکوریت با یک لایه چسب که مانع از پرتاب خرده های شیشه به سوی کاربر میباشد. رویه (صفحه آزمایشگاهی) که در انواع مختلف دارای کاربری های خاص میباشد شامل: سرامیک سنگ طبیعی گرانیت، کوارتز کورین، ترسیا، کرپلن، hpl، کامپکت لامینت میباشد. که چند مورد را هم طبق تصاویر مشاهده مینمایید.

4\_ هود دارای وزنه تعادلی که در بین ریل های لغزونی ضد اسید به صورت روان تعبیه شده که نقش مهمی را در بالا و پایین کردن شیشه برعهده دارد که به دو صورت دستی و اتومات انجام میگردد.

5\_ دارای یک دستگاه فن پلیمری ساترفیوژ 1400 با پره های مقاوم در برابر بخارات اسید و بدنه دوجداره هود با خروجی 150mm قوی که جهت جلوگیری از انتشار گاز و بخارات اسیدی در محیط آزمایشگاه و سلامتی پرسنل.

6\_ دارای 2 عدد پریز برق 14p ارت دار تک فاز با کابل 3x3/2 قوی.

7\_ شاسی کشی شده با پروفیل 30x30 با ضخامت 1/5 و با پوشش رنگ الکترواستاتیک ضد خش کوره ای.

8\_ تمامی متریال استفاده شده در هود از برندهای دارای استاندارد و بروز میباشد.

9\_ دستگاه شامل 1 سال گارانتی بی قید و شرط میباشد و 10 سال خدمات پس از فروش میباشد طول 100\_120\_150 متغییر به مکان عرض 75 ارتفاع 220.



### (هود لامینار)

### یا هود میکروبی کلاس II



Laminar Flow Hood دارای محیطی کاملاً بسته می‌باشد که برای جلوگیری از ورود آلودگی به محیط نگهداری نمونه طراحی شده است. در این دستگاه هوا از درون فیلتر HEPA (فیلتر های مورد استفاده در هود لامینار فیلتر های HEPA است که هوای اتاق را می‌کشد و هوای تمیز را پس می‌دهد عبور کرده و بسیار آرام و به سمت کاربر می‌رود محافظه این هود معمولاً از جنس استیل ضد زنگ و یا فلز ساخته می‌شود که به صورت بدون درز و کاملاً آب بند فضای داخلی طراحی می‌شود تا قارچ و جرم درون محافظه بوجود نیاید.



رنگ هود الکترولستاتیک، کوره ای ضد خش می باشد. اما انواع رنگ های دیگر را نیز می توانید انتخاب کنید. ابعاد هود یا توجه به نیاز خریدار قابل ساخت سفارشی می باشد. دارای 2 عدد فیلتر تصفیه هوا که با کالیبراسیون 99.98 تایید شده از مراکز عرضه فیلتر میباشد که طبق نظریه بهداشت محیط هر 6 ماه یا 1800 ساعت باید تعویض گردد. لامپ UV برند philips جهت استریزه کردن محیط کار دستگاه که دارای تایمر فرار و پایین کار هوشمند بدون نیاز حضور فرد در آزمایشگاه به صورت تمام هوشمند و اتوماتیک میباشد. درب هود نیز تمام برقی اتومات میباشد که به وسیله برد هوشمند با لاپواین میشود بدون هیچ گونه صدا و لرزش. عمدتاً ورودی های از چپ و راست هود جهت استفاده از ورودی گاز برای استفاده از شعله تعبیه شده است. دستگاه دارای طلق 6 میلیمتری فلکسی تابوانی میباشد جهت سلامت کاربر. دارای برد هوشمند 1500 که دور موتور هود 1400 را به سه قسمت کند متوسط و تند را طبق کاربری گازبر تنظیم میکند که دارای الوم تعویض فیلتر در ساعت پایان عمر فیلتر را به کاربر اعلام میکند و دارای تایمر گازکرد موتور، تایمر UV، تنظیمات روشنایی و بالا پایین کردن شیشه و روشن خاموش کردن دستگاه با رمز ورود شخصی میباشد که کلیه تایمر ها و رمزها قابل تغییر طبق استانداردهای روز میباشد. دارای 4 چراغ 14 سانتی از برند مرغوب جهت جابجایی راحت تر در موقع تعویض فیلتر و جابجایی در آزمایشگاه. دارای نمایشگر سنسور دمای داخل هود به کاربر بروی صفحه برد هود جهت سهولت در جابجایی در موقع نصب به صورت دوتکه ساخته میشود. دارای 3 سینی متحرک تمام استیل 304 در کف هود برای سهولت در نظافت ضمانت دستگاه از موقع نصب 18 ماه و 10 سال خدمات پس از فروش میباشد. طول 100\_130\_150 متغییر به دلخواه مشتری عرض 80 الی 90 ارتفاع 200.

CLASS II

ATA  
Arta Tajhiz Amika  
آرنا تجهیز آرنیکا

## هود پاتولوژی

هود پاتولوژی در دو نوع کابین دار با شیلد محافظ و بدون کابین تمام استیل جهت انجام آزمایش‌های میکروبی، سلولی، بافت‌ها، عملکرد ارگانیسم‌های زنده، بررسی مایعات و همچنین سایر نمونه‌های اخذ شده از بدن مانند: ادرار، خون، مدفوع و نمونه‌های ظاهری (گوشت، کیست)، سلول‌های سرطانی و... که به وسیله پاتولوژیست یا سایر پزشکان انجام می‌گیرد، در آزمایشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از موارد مهم و قابل توجه استفاده از هود پاتولوژی فن یا مکنده هوا است که جهت جلوگیری از پخش بوی نامطبوع فرمالین و یا نمونه‌ها وظیفه آن هدایت کردن تمامی گازها و آلاینده‌ها و بخارهای سمی موجود به طرف خارج از فضای آزمایشگاه می‌باشد.



# ATA

## Ar To Tajhiz Arnika

- که از دو صورت مکش از بالا یا پایین که بنا به نوع هود میباشد تا به این صورت هوایی پاک و بدون آلودگی برای کاربران فراهم شود. این کار علاوه بر حفظ سلامت کارکنان و پرسنل، از نمونه‌های آزمایشگاهی و آلوده شدن آنها نیز محافظت میکند.
- 1\_ مدل کابین دار دارای برد هوشمند 1120 میباشد 2\_ فیلتر کربن اکتیو که در هر دو هود مشترک میباشد.
  - 3\_ سیستم روشنایی 40w که در هر دو هود مشترک میباشد.
  - 4\_ لامپ uv برند philip جهت ضد عفونی و استریلزه محیط که فقط در مدل کابین دار استفاده میگردد.
  - 5\_ دارای سینک و صفحه کار و دیواره دوجداره از نوع استیل 316 ضد اسید استفاده شده که در هر دو مدل هود مشترک میباشد اکتیو روشنایی صفحه استیل ضد اسید 314 و سینک استیل شستشو مشترک میباشد.
  - 6\_ در مدل کابین دار دارای شیلد محافظ از نوع 6 میلیمتری تابوانی جهت انتشار بوی فرمالین
  - 7\_ دارای نخته برش برای برش بافت ها 8\_ دارای مگنت جهت نگهداری ابزار جراحی و برش
  - 9\_ دارای شیر شاموری جهت سهولت و دسترسی راحت به تمام نقاط هود 10\_ هود کابین دار برد هوشمند و تلیمر کلرکرد فن و UV میباشد.
  - 11\_ دارای فن بین کانالی بی صدا در بالای دستگاه میباشد که از لحاظ مکش بسیار قوی و در خارج از ساختمان نیاز به نصب استراکچر و سایبان ندارد.



## هود شیمی درمانی


از جمله تجهیزاتی است که در فرآیند درمان بیماران مبتلا به سرطان، کاربرد دارد و برای حفظ سلامت پرسنل درمانی درموقع کشیدن داروی بیماران به کار می‌رود. این هود به قیمت یک سوم مشابه خارجی در شرکت آرتا تجهیز آرنیکا ساخته میشود که با استفاده از داخلی سازی این هود قطعات دستگاه به راحتی در دسترس میباشد. مشخصات کامل هود شیمی درمانی مدل T120 باپرد هوشمند 1. دارای برد هوشمند جهت تایم کارکرد و زمان مناسب تعویض فیلترها.  
2. مجهز به لامپ UV برند Philips جهت استریزه کردن محیط کار دستگاه.  
3. مجهز به تایم فرار UV که کاربر میتواند در زمان پایان کشیدن دارو جهت استریزه کردن محیط هود به مدت 10 ثانیه ترک کند و لامپ UV به صورت اتومات روشن و بعد از یک ساعت خاموش میشود که کلیه تایم ها قابلیت تنظیم کم یا زیاد را دارند.





## ArTa Tadjiz Archika

- 4\_ دارای دستکش آستین دار برای سهولت در کشیدن دارو بیمار.
- 5\_ مجهز به شیلد محافظ از جنس پلک 6 میل نیونی که به وسیله وزنه تعادل در ریل طولونی به راحتی بالا و پایین میشود.
- 6\_ دارای دیواره دوجداره تمام استیل 316 ضداسید که قسمت پایین دارای پنل هواکش جهت مکش بهتر میباشد.
- 7\_ مجهز به دو عدد فیلتر هپا با درصد خالص 99/98 و یک عدد فیلتر کربن اکتیو.
- 8\_ بدنه بیرونی دستگاه از ورق فومیزه PVC روکش دار از بهترین برند بازار که در برابر مواد اسیدی و بازی کاملاً مقاوم میباشد.
- 9\_ دارای چرخ های مستحکم جهت جابجایی و حمل و نقل بهتر.
- 10\_ دارای پرز IP44 استاندارد.
- 11\_ دارای شاسی از پروفیل 30 x 30 با ضخامت 1/5 میلیمتری با پوشش رنگ الکترواستاتیک کوره ای ضد خش.
- 12\_ دارای فن بسیار قوی ضداسید بدون صدا تمام PVC ضداسید با مکش 400cfm ابعاد طول 100/120/150 بنا به سفارش مشتری هم متغییر و ارتفاع 200 عمق 80 الی 90 میباشد.

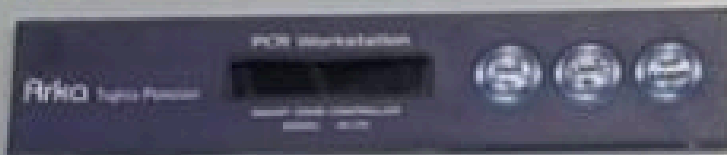

## هود وورک استیشن (PCR) work station

قابل استفاده در آزمایشگاه های ژنتیک و زیست شناسی میباشد. در رابطه با جنبه های کاربردی متنوعی طراحی شده اند از جمله تست های ژنتیک، تشخیص ژنتیکی پیش از کاشت، بررسی بافت های پیوندی پیش از پیوند، تست آنکوژن (ژن های عامل تومور)، معین سازی ارگانیزم های بیماری های عفونی، کشف مقاومت به آنتی بیوتیک به منظور گسترش روش های درمانی جدید، کشف زیر نوع های ارگانیزم بیماری در جمعیت های حیوانی به منظور نظارت بر بیماری های اپیدمی بالقوه، کاربرد های عمومی در زمینه ی جرم شناسی، پروتکل های اثر انگشت برداری ژنتیکی، ژنتیک مولکولی، ایجاد پروب های هیبریداسیون، کلون کردن PCR، DNA کمیتی و به علاوه کاربرد های ویژه همانند با آنالیز فیلوژنی DNA در باستان شناسی که دو مدل ساده و هوشمند عرضه می شود.






# Arta Tajhiz Arni

- 1\_ در زمان ساخت بنا به کاربری مشتری از فیلتر هپا هم در بعضی مدل ها استفاده می شود استفاده میشود.
- 2\_ هود دارای بردهوشمند که در مدل ساده از کلید قطع و وصل استفاده می شود.
- 3\_ تایمر کارکردن و لامپ UV جهت اطلاع کاربر از ساعت کارکرد.
- 4\_ دارای لامپ UV برند philip جهت استریزه کردن محیط دستگاه.
- 5\_ دارای سیستم روشنایی 40w.
- 6\_ دارای میز کار یا صفحه استیل 316 ضداسید.
- 7\_ بدنه در دو نوع pvc و یا فرمیکا استفاده میشود.
- 8\_ دارای درب تاشو دوتکه جهت استفاده راحت کاربر از جنس پلک (میلیمتری تابوانی).
- 9\_ دارای فن ضداسید.
- 10\_ در دو نوع ساده رومیزی و پرتابل چرخ دار.

### هود سقفی

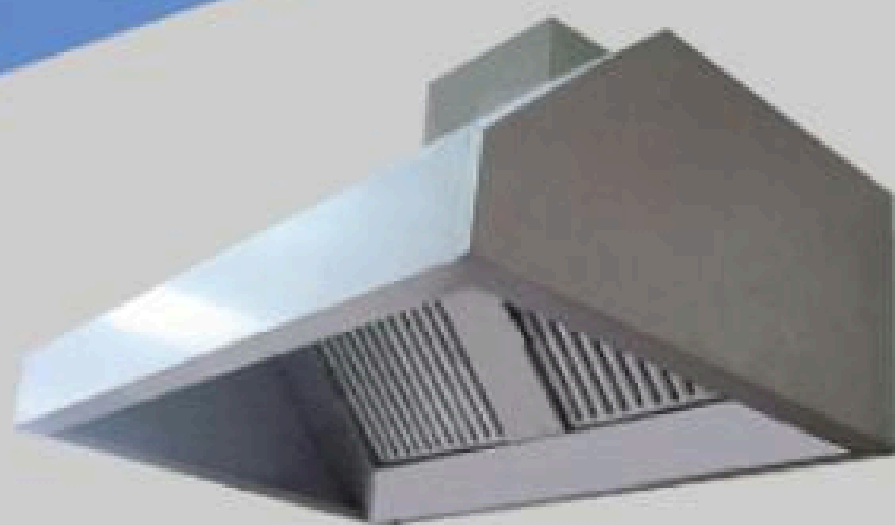

- 1\_ جهت استفاده از بخارات و مواد اسیدی.
- 2\_ دارای نمونه فیلتردار و بدون فیلتر.
- 3\_ قابلیت استفاده در آزمایشگاه تجزیه ادرار.

### هود بازویی یا مفصلی



- 1\_ دارای بازوهای مفصلی متحرک تمام pvc ضد اسید که جهت مکش قوی بخارات اسیدی و بازی.
- 2\_ نصب راحت بر روی میزهای وسط و یا کنار.
- 3\_ میزان مکش مواد بین 80 الی 180 مترمکعب در ساعت.

## فن سانتریفیوژ

که معمولا در Hood های شیمیایی، پاتولوژی، شیمی درمانی و یا هودسفنی قابلیت استفاده میابد که در موارد خاص بنا به استفاده نوع اسید تماما با بدنه تمام PVC ضد اسید ساخته میشود که در دو نوع تک فاز و یا 3 فاز با قابلیت مکش متفاوت میابد.





## پارتیشن بندی و کانتر پذیرش

باتوجه به قسمت های مختلف آزمایشگاه ورودی هر بخش از آزمایشگاه دارای کانتر و یا قسمت پذیرش میباشد که دارای بخش های مختلف نظیر پذیرش، صندوق، باجه و سایر قسمت ها و نیز قسمت پارتیشن بندی که فضا های غیر مرتبط را از هم تفکیک می کند که رنگ بندی، طراحی و متریال متفاوت طبق نظر کارفرما میباشد.





## قفسه بندی داروخانه

که در قسمت داروخانه و انبار داروخانه طبق محیط طراحی و اجرا می گردد که قفسه بندی ها به دو صورت استاده و پیشخوان دار که طبق محیط جغرافیایی کشور از جنس ام دی اف و یا pvc ساخته می باشد که در رنگ بندی های خاص طبق نظر مشتری ساخته میشود.



## تجهیز اتاق دارو(تمیز)

باتوجه به استقبال زیاد از این طرح که بیشتر در قسمت های اتاق دارو و اتاق تمیز استفاده می شود و به لحاظ رنگ بندی های خاص و متنوع ترکیبی از PVC فومیزه و استیل جهت روح بخشیدن به محیط کار پرسنل که با استفاده از نظرات کاربران طراحی شده است.



## قفسه انبار استیل

ساخته شده از ورق  
و پروفسیل که باتوجه به  
درخواست مشتری قابل تغییر  
میباشد که هم از لحاظ  
طول ، عرض و ارتفاع و تعداد  
طبقات قابل تغییر میباشد.





## شلف دیواری یا رف

که در دو نوع ساده و یا مشبک ساخته میشود که مدل مشبک که حالت آبچکان را دارد در بالای سینک و مدل ساده در بالای میز کار جهت قراردادن وسایل سینک مورد استفاده قرار می‌گیرد که بر روی دیوار قابلیت نصب را دارد.



## میز کار استیل

جهت استفاده در محیط آزمایشگاه و یا سایر بخش‌های درمان جهت قراردادن نمونه‌ها و یا مواد بر روی این میزها استفاده می‌شود و آزمایش‌های خوب این میزها شستشو راحت و پرتابل بودن این میزها جهت جابجایی و امور نظافت به حساب می‌آید که تمام از نوع ورق و پروفیل تمام استیل (304 و یا 316) ساخته میشود و توانایی وزن قابل توجهی می‌باشد.





## ترالی

جهت جابجایی نمونه و پامواد آزمایشگاهی در محیط های درمانی و یا آزمایشگاهی در انواع مختلف و کاربری های خاص ساخته میشود.



## انواع سینک ها

سینک دولگن شستشو:

- 1- کاربرد این سینک برای شستشو محلول و یا شستوی برخی ابزار آزمایشگاهی میباشد.
- 2- بدنه این نوع سینک تماما از فلز استیل (آلیاژ 316) ساخته میشود.
- 3- دارای لگن یک تکه و با عمقی استاندارد.
- 4- باتوجه به کاربری های مختلف اندازه ها قابل تغییر میباشد.





## کلینیکال سینک

جهت کاربری در محیط های اتاق کتیف و آزمایشگاهی و دفع تخلیه مواد ویا نمونه به دو نوع ساده ویا میله ساخته میشود که همما از نوع استیل یا آلیاژ (316)ساخته میشود و دارای شیر شستشو و نازل دستی ویک عدد فلاش تانک جهت فشار تخلیه وسریع مواد.


## سینک اسکراب

ساخته شده از ورق استنلس استیل یا آلیاژ (316) که در محیط های شستشو ویا اتاق عمل و ایزوله استفاده میشود دونوع تک نفره ویا دونفره که به دونوع تک ویا دوجداره تقسیم میشود که دارای شیرآلات مسجوری، آرنجی ویا پدالی مورد استفاده قرار میگیرد.



# ATA

Arta Tajhiz Arnika  
آرتا تجهيز آرنیکا

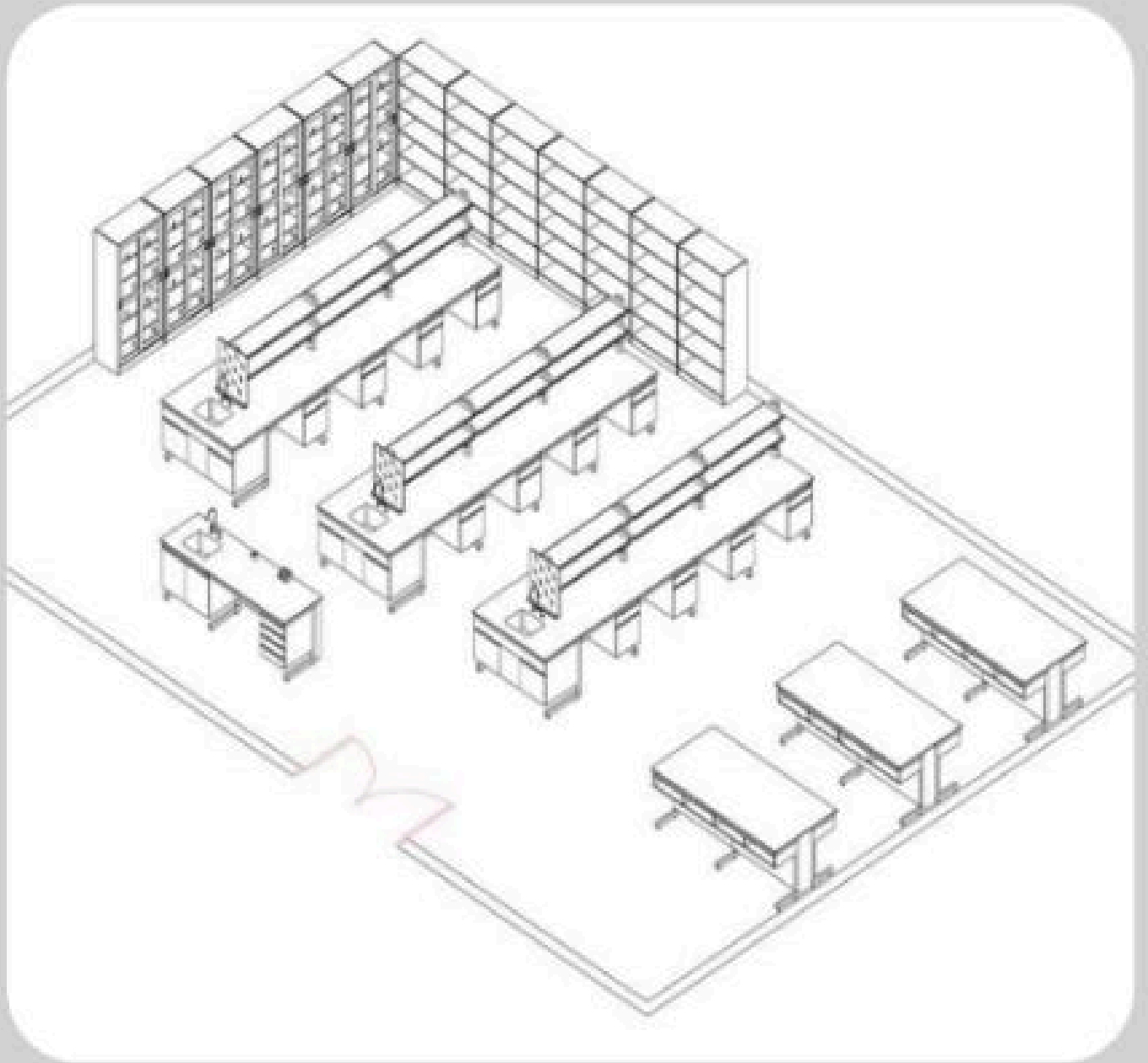

QUALITY CERTIFICATION BUREAU ITALIA

Certificate of Conformity n. D-2921-20  
to UNI CEI EN ISO 13485:2016 standard

Awarded to

**Arta Tajhiz Amika**

Registered Office: Via Sesto 12, 20139 Milan (L. Lombardy) - Italy  
for the implementation of Quality Management System on site  
Via Sesto 12, 20139 Milan (L. Lombardy) - Italy

Date: 20

Scope: Manufacture of industrial machine and hospital bedding equipment.

The validity of this certificate is subject to successful audits (semi-annual) and to regular maintenance of management system over time.

Date of Original Registration: 12/05/2020  
Date of Current Registration: 12/05/2020  
Renewal/Review Date: 12/05/2021



QUALITY CERTIFICATION BUREAU ITALIA - Via Sesto 12, 20139 Milano (Lombardia) - Italy  
Tel. +39 02 760112001 - Fax +39 02 760112002 - Email: info@qcb.it

QUALITY CERTIFICATION BUREAU ITALIA

Certificate of Conformity n. G-2921-20  
to ISO 9001: 2015 standard

Awarded to

**Arta Tajhiz Amika**

Registered Office: Via Sesto 12, 20139 Milan (L. Lombardy) - Italy  
for the implementation of Quality Management System on site  
Via Sesto 12, 20139 Milan (L. Lombardy) - Italy

Date: 20

Scope: Manufacture of industrial machine and hospital bedding equipment.

The validity of this certificate is subject to successful audits (semi-annual) and to regular maintenance of management system over time.

Date of Original Registration: 12/05/2020  
Date of Current Registration: 12/05/2020  
Renewal/Review Date: 12/05/2021



QUALITY CERTIFICATION BUREAU ITALIA - Via Sesto 12, 20139 Milano (Lombardia) - Italy  
Tel. +39 02 760112001 - Fax +39 02 760112002 - Email: info@qcb.it

TERRAN CHAMBER OF COMMERCE  
REGISTERED MEMBERS ASSOCIATION



تجارتخانه کمره بازرگانی تران

کامبریت

Certificate of Membership

Company Name: **Arta Tajhiz Amika**  
Type of Company: Ltd.  
Sector's Name: **SAEYAN BORTICZA**  
Type of Firm: Legal  
Firm No: 1449003204  
Company Activity: Business  
Firm Code No: 00230070  
Firm Sector No: 00230071  
**TERRAN MAN**  
Address:

Arta Tajhiz Amika

نام شرکت:  
نوع شرکت: شرکت با مسئولیت محدود  
نام بخش: ساین بورتیسا  
نوع شرکت: قانونی  
شماره شرکت: 1449003204  
نوع فعالیت: تجاری  
کد شرکت: 00230070  
کد بخش: 00230071

نشانی شرکت: تران - کمره بازرگانی تران - بخش تران - کمره بازرگانی تران - کمره بازرگانی تران - کمره بازرگانی تران  
آدرس: کمره بازرگانی تران - کمره بازرگانی تران - کمره بازرگانی تران - کمره بازرگانی تران - کمره بازرگانی تران  
شماره:

Secretary General  
شماره:





info@ata-tajhiz.com



www.ata-tajhiz.com



arta\_tajhiz\_arnika.co



دفتر مرکزی : تهران ، خیابان ستارخان ، خیابان باقرخان ، پلاک ۷۰ ، طبقه ۴ ، واحد ۸  
تلفن : ۶۶۹۰۸۰۳۲ / ۶۶۹۱۹۸۳۹ / ۶۶۹۰۸۳۵۴ کدپستی : ۱۴۴۱۶۳۳۷۵۹  
کارخانه : اتوبان تهران قم شهرک صنعتی شمس آباد بلوار بوستان گلبن ۱۲ پلاک ۱۶  
تلفن : ۵۶۲۳۶۱۵۱ / ۵۶۲۳۶۱۵۰ کدپستی : ۱۸۳۱۶۵۴۸۳  
Office: 4th floor, Unit8, No70, Bagherkhan St, Sattarkhan St, Tehran, Iran Postal  
Tel: (+9821)66908032 - 66908354 - 66919839 Code:1441633759  
Factory: No. 16, 12th Golban., Bostan B lvd. Shamsabad Industrial Estate- Tehran  
Qom Express Way Tehran.iran Telfax:(+9821)56236150-(+9821)56236150