





چیدمان آزمایشگاهی اقتصادی Z-Scan

- تعیین خواص اپتیکی غیر خطی مواد
- اندازه گیری خودکار و دقیق

تکنیک Z-Scan یک روش آزمایشگاهی محبوب و ساده جهت اندازه گیری پذیرفتاری غیر خطی وابسته به شدت است. در این روش نمونه در راستای محور Z و در طول یک باریکه گوسی کانونی شده حرکت می کند و شدت میدان دور به صورت تابعی از مکان نمونه اندازه گیری می شود. منحنی آنالیز شدت بر حسب مکان نمونه قسمت های حقیق و موهومی پذیرفتاری مرتبه سوم را بدست می دهد. کیت آزمایشگاهی Z-Scan شامل تمام ا

از دستگاه ا

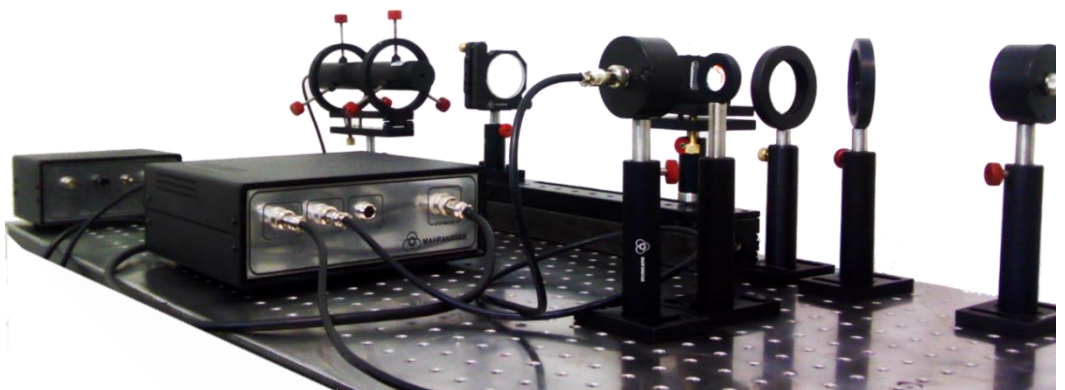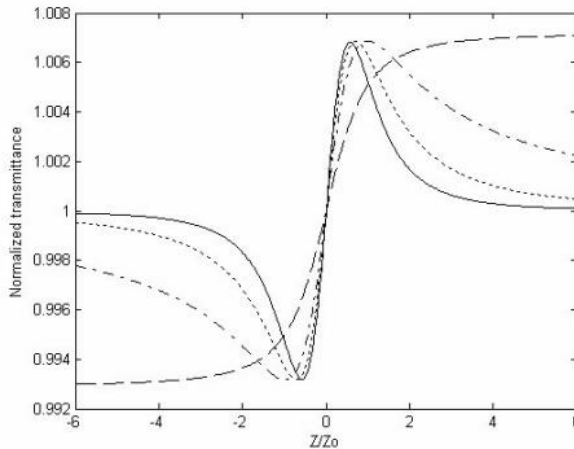

شماره فنی	نام محصول
ECO Z-SCAN	چیدمان آزمایشگاهی اقتصادی Z-Scan



مشخصات چیدمان آزمایشگاهی اقتصادی Z-Scan

ردیف	شرح	تعداد
۱	میز اپتیکی ۵۰۰*۱۰۰۰*۱۰۰ میلی متر با پایه ثابت	۱
۲	نرم افزار کنترل z-scan	۱
۳	باریکه شکن با ۹۸٪ عبور	۲
۴	جابجاگر خطی موتوردار (دقت: ۵۰ میکرون، حداکثر جابجایی: ۲۰ سانتی متر)	۱
۵	آشکارساز	۲
۶	پایه H	۸
۷	نگهدارنده میله ۵۰ میلی متر	۷
۸	نگهدارنده میله ۱۰۰ میلی متر	۱
۹	میله ۵۰ میلی متر	۷
۱۰	میله ۱۰۰ میلی متر	۱
۱۱	نگهدارنده اپتیکی	۴
۱۲	عدسی دابلت با فاصله کانونی ۱۹۰ میلی متر	۱
۱۳	واسط الکترونیکی آشکارساز و رایانه	۱
۱۴	لیزر دیودی ۵۰ میلی وات، ۵۳۲ نانومتر	۱
۱۵	نگهدارنده سل	۱
۱۶	نگهدارنده صفحه متحرک	۱
۱۷	سل کوارتز ۱ میلی متر	۱
۱۸	عدسی سینگلت	۲

اپتومکانیک

کنترل حرکت

منابع نوری

سیستم های
اپتیکی