


شمارنده بیوفوتون

PTB-BPHC

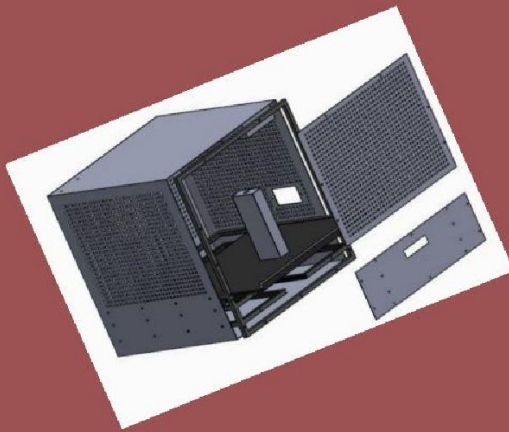

Bio-Photon Counter

شرکت
پروتو تجهیز بعثت
(دانش بنیان)
شماره ثبت: ۵۰۰۳۳۶



شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه بیوفوتون به شرح ذیل میباشد:

- 1- از ضربه های مکانیکی در حمل و نقل آنها باید جلوگیری شود.
- 2- محدوده دمایی دستگاه بین 10- تا 50 درجه سانتیگراد است.
- 3- دستگاه ضد آب و ضد ضربه نیست.
- 4- نباید دستگاه از بیرون دستگاه نور دریافت کند.
- 5- دستگاه باید در اتاق کاملاً تاریک قرار گیرد.