# Sanat Pardaz Dena Co. LTD



# Benchtop Shell Bath Freezer

Efficient, Convenient, and Easy to Use System for Prefreezing Samples for Lyophilization

# **General features**

fers simple and safe method for unattended prefreezing a flask
Microprocessor controlled for separate •
,refrigeration, flask rotation
compact design for benchtop operation
:Enables one coating options •
Cylindrical coating which provides –
the highest surface to volume ratio of
.sample to be freeze dried


## Model SF-4001-BT



The new Dena vacuum Benchtop Shell Bath Freezer is a self-contained, compact freezing unit designed to produce a coating on the inside of freeze-drying flasks. Using this method makes the freeze-drying process far more efficient by facilitating vapor flow from the sample during lyophilization. The Denavacuum Benchtop Shell Bath is the perfect processing companion to your Denavacuum brand Benchtop Freeze Dryer. Available in a temperature models, °40-C, the Bath is mounted in a streamlined, compact cabinet. Freeze-drying flasks are automatically rotated in a refrigerated bath containing alcohol or any other freeze resistant fluid. The stainless steel rollers rotate the freeze-drying flasks creating a thin frozen coating around the inside of the flask.


### **The Shell Freezing Processes**



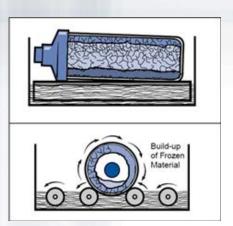

#### **Specifications**

- All steel framing for vibration free operation
- Corrosion resistant stainless steel bath and rollers
- Removable motor assembly for easy cleaning
- Front panel removable drain for easy adjustment or draining of bath liquid
- Spill resistant instrument panels
- Transparent cover to minimize evaporation
- Compact/lightweight for benchtop operation

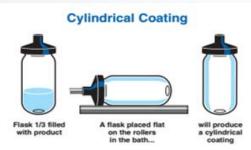

Fill the flasks slightly less than 1/3 and place the flask on the rollers. The rollers will rotate the flasks while the refrigerated bath freezes the product. This results in a thin, even, high surface area coating of frozen material on the inside of the flask.

Capacity(ml)	Flask Opening Diameter (mm)	Height (mm)	Contents for 1cm layer(ml)
75	68	55	45
150	68	95	115
300	48	14	226
600	68	155	302

No 13,16.5 honar Alley,17 (Kaveh Bolvar) Street,Chahardange Industrial Area,Saeedy High Way ,Tehran,Iran

www.Denavacuum.ir

021-55448518

021-55272834

آدرس کارخانه : تهران، اتوبان آیت ا... سعیدی شهرک صنعتی چهاردانگه، بلوار کاوه ( خیابان ۱۷ ) خیابان ۱۶/۵ هنر پلاک ۱۳

۰۲۱-۵۵۴۴۸۵۱۸

0 1 1 - 66 1 V Y A M F

Denavacuum@gmail.com