


شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی اسکنر سه بعدی و نرم افزار تحلیل گر بدن انسان  
**BODYLYZER**

جهت کارکرد صحیح اسکنر سه بعدی بدن انسان نیاز به محیطی با ابعاد ۲/۵ متر در ۲ متر می باشد که فاصله های مورد نیاز از هر سمت دستگاه طبق شکل زیر خواهد بود.

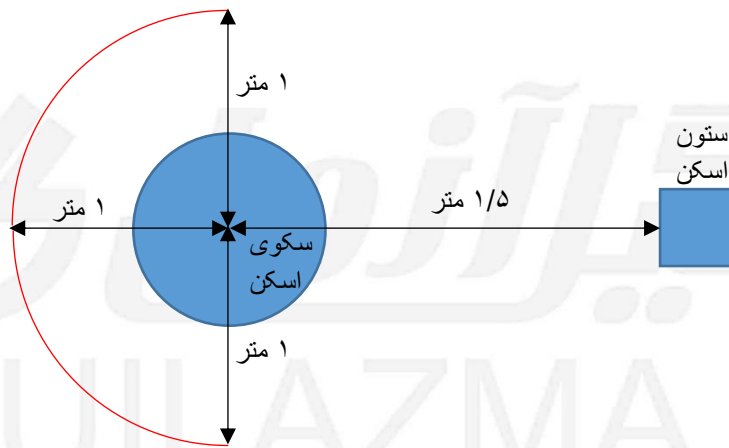

به منظور کاهش نویز در فایل سه بعدی اسکن شده می بایست پشت سکوی اسکن (ناحیه ی مشخص شده با نیم دایره ی قرمز رنگ) دیواره ای از جنسی غیر فلزی که ویژگی انعکاسی نداشته باشد پوشانده شود.